



# 肛门灌肠操作说明书

## 肛门灌肠操作说明书

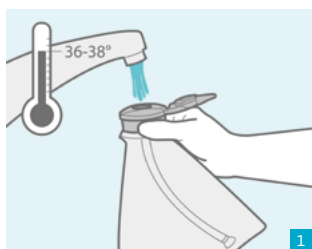


请用温水 (36–38 °C) 将水袋填充至零刻度线。填充完毕后请将盖子重新关好。当您听到咔嚓声时，表明盖子已经关紧。


请利用灰色连接器将软管与盖子的灰色旋拧接口相连。请将连接器顺时针旋转90°并以此将连接器锁定。

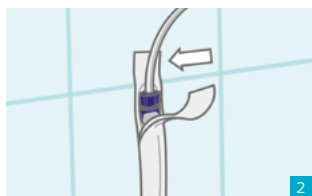

仅可在上部区域 (2–3厘米) 打开导管的包装。请将直肠导管插至具有蓝色连接器的软管上并且旋转90°直至连接器卡止。

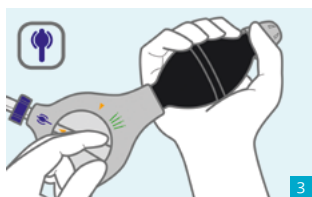

为了激活涂层请将旋钮旋转至水标志处并且将水泵入导管包装 (2–3次泵送)。请将旋钮置于气球标志处，并以此中断水流。请等候30秒钟直至涂层被激活。

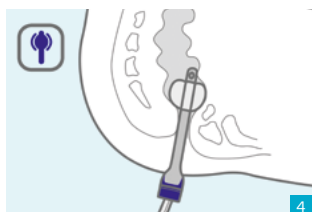


缓慢而小心地将导管送至把手处并且泵送1至2次，以此闭锁导管。

**建议：**如果气球通过轻微的拽动可被重新去除或者有水溢出，则应当补充泵送1次 (最多共3次)




请务必在相同的时间注入洗液：理想的时间点是早餐后30分钟。亦可在晚餐后进行。重要的是保持固定的频率节奏。

不得使用附加的润滑剂：得益于导管的涂层而无需使用凡士林等附加的润滑剂。它们甚至会损害气球的稳定性并导致其爆裂。

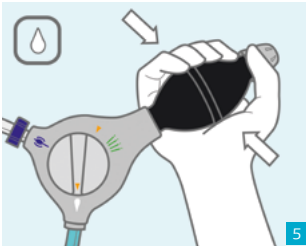

请将旋钮旋转至水标志处并缓慢地将水泵送至肠道内。务必以每步100ml进行操作，直至达到必要的水量。

建议：在水填充之间务必旋转至气球标志，以此避免填入的水回流。

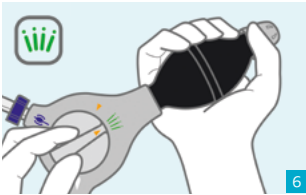

随后将控制单元的旋钮旋转至空气标志。现在请轻轻地拉软管，旨在移除直肠导管。



请在卫生间内保持坐姿。肠道清空会自动开始。如果未自动开始，您可利用上体运动、腹部按摩或咳嗽激发肠道清空。清空时间因个人情况有所不同，通常约为30分钟左右。



请将直肠导管与软管系统分离并且将其置于生活垃圾之中。然后请将软管与袋子分离并且清空剩余的水。请将旋钮旋转至橙色标志，随后请将系统悬挂晾干。

